




Kimyasal İndikatörler Formaldehit sterilizasyon işlemleri

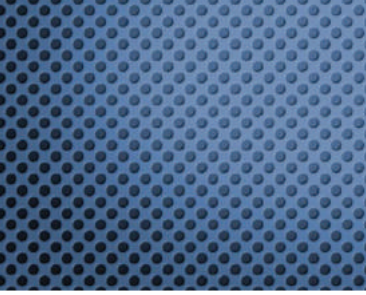


Formaldehit aşağıda verilen ısı-duyarlı mazlemelerin Etilen Oksit sterilizasyonuna alternatif olarak kullanılır:

- Laparoskopik cerrahi aletleri
- Ventilatör aletleri
- Optamoloji aletleri
- Kateterler
- Bağlayıcı borular
- Akış sensörleri
- Optik sistemler
- Endoskop telleri
- Pnömatik motorlar
- Laparoskopik forsepler
- Rijit endoskoplar

Avantajlar

- Havalandırmaya ihtiyaç duymaz
- Her çeşit ısı-duyarlı malzeme ile uyumludur.
- Buhar sterilizasyon işlemlerinde kullanılan paketler ile uyumludur.

Tüm formaldehit sterilizasyon kontrol ürünleri ISO 13485 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri altında üretilir.

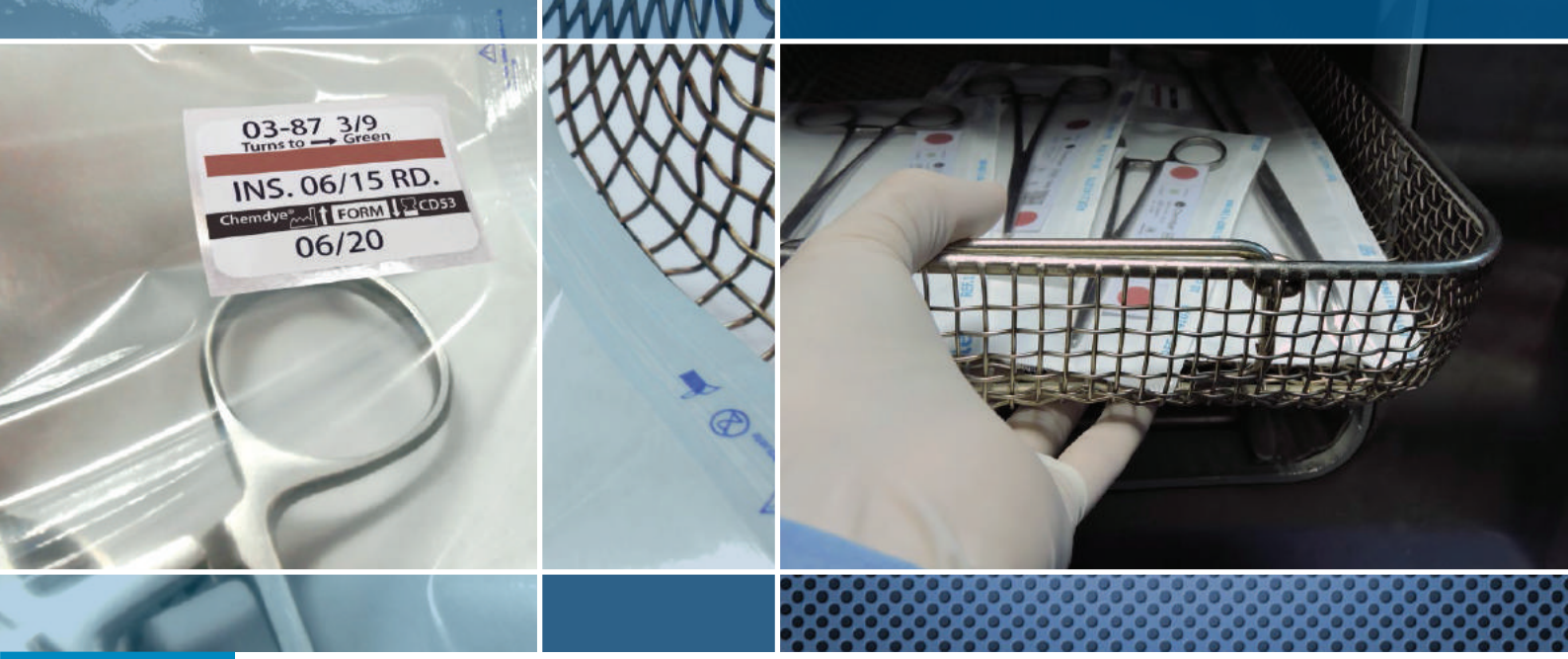

Harici kullanım



Chemdye® Cintape® Harici kullanım için kendinden yapışkanlı etiket ve bantlar CD51 CD57 CT50

Tip 1

Cintape® bantlar ve Chemdye kendinden yapışkanlı etiketler Formaldehit sterilizasyonuna maruz kalmış ve maruz kalmamış paketleri ayırt etmek için geliştirilmiştir.

Kendinden yapışkanlı bantlar ve etiketler sterilize edici ajan varlığında belirgin bir renk değişimi gösterirler.

Avantajlar

- Farklı paket ve sarma türlerine, kumaş, kağıt veya plastik gibi, yapışma yeteneği
- Sterilizasyon işlemlerinde oluşan fiziksel ve kimyasal agresyona dayanıklı yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.
- Çıkarılması kolay, atıksızdır.
- Yük izlenebilirliğini kolaylaştıran, yüzey üzerine yazılmasına izin verir.
- Sterilizasyona girmiş ve girmemiş paketlerin ayırt edilmesini sağlayan belirgin renk değişimi.
- 100% metal içermeyen Chemink® mürekkepleri ile üretilmiştir.



Tavsiye bilgiler

- 1 Sterilatör numarası
Parti no
- 2 İşlem kimyasal indikatör
- 3 Sterilizasyon tarihi
Sorumlu personel ismi
Paket içeriği
- 4 Son kullanım tarihi

Orjinal İşleme girmiş ve doğru

Chemdye® dokümantasyon için kendinden yapışkanlı etiketler CD53

Tip 1

Chemdye® dokümantasyon etiketleri Class 1 işlem indikatör mürekkebi basılı bir satıra sahiptir. CD53 etiketleri çift yapışkanlıdır. Çift yapışkan teknolojisi kayıtlama amacıyla etiketlerin sterilizasyon paketlerinden kolay çıkarılmasına izin verir. CD53 etiketler her satırında 12 basamağın olduğu 3 satır basabilen Chemdye® CG3 etiketleme tabancası ile kullanılabilir. Bu ürünler ISO 11140-1 standartlarına göre üretilmiştir.

Avantajlar

- Sterilizasyon işlem bilgi takibine imkan verir.
- Parti no kayıtlarındaki hataları engeller.
- Class 1 indikatör renk değişimi hassasiyetinden ötürü sonuçların kolay yorumlanması
- Chemdye® dokümantasyon sistem çift-yapışkan teknolojisi sayesinde çıkarılması ve tekrar yapıştırılması kolay
- Otomatik makineyle hızlı etiketleme
- Çok düşük maliyet
- % 100 metal-içermeyen Chemink® mürekkepleriyle üretilmiştir



Dahili kullanım



Chemdye® dahili kullanım için işlem indikatörleri

CD50 CD52 CD54

Tip 1 / Tip 4

Tip 1 Chemdye® CD52 ve CD54 dahili kullanım şeritleri sterilizasyon paketleri veya sterilizasyon haznesinin belirli bir bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Chemdye® CD52 ve CD54 dahili kullanım şeritleri üzerine yazılmasına imkan tanımak dolayısıyla şerit üzerinde sterilizasyon koşulları kayıt altına alınabilir. Tip 4 Chemdye® CD52 ve CD54 dahili kullanım şeritleri istene parametre değerlerine ulaşıp ulaşılmadığını çabuk bir şekilde tespit eden çok-değişkenli indikatörlerdir. Bu ürünler ISO 11140-1 standartlarına göre üretilirler.



Metals free

Gelişmiş ülkelerde bir çok metal tehlikeli atık olarak görülür.

Terragene® %100 metalden arı Chemink® mürekkepleriyle üretilir ve piyasaya arz edilir.

Avantajlar

- Çok pratik ve kullanımı kolay
- Kolay analiz ve yorumlama, kimyasal indikatördeki renk değişimi çok hassas
- Çabuk sonuçlar
- Düşük maliyet.
- Chemink® mürekkepleri ile üretilir, 100% metal içermez.

